


乾電池式（試供用単三乾電池1個付）

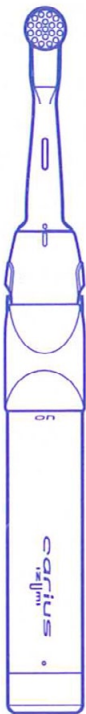

carius
izumi

キャリウス

電動ハブラシ

DB-110 乾電池式
(家庭用)

取扱説明書

- このたびは電動歯ブラシをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みになり正しくお使いください。

も く じ

- 安全上必ず守ってください.....1
- 警告・注意.....2
- 使用上のご注意.....2~3
- 各部の名称.....3
- 商品特長.....4
- 使用方法.....5~7
- 仕様.....7
- お手入れのしかた.....8
- アフターサービスについて.....9
- 無料修理規定、保証書.....巻末

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家具・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

絵表示の例



△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左記の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左記の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左記の場合は電源プラグをコンセントからぬく。）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



あおむけや、それに近い姿勢で使用しないこと。
●先端のチップがはずれた場合、のどにつまることがあります。



改造はしないこと。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理しないこと。
●けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店又はメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

注意



歯ぐきにチップを強くあてすぎないこと。
●歯ぐきを傷めることがあります。歯槽膿漏の方は歯科医にご相談ください。※定期的に歯科医の診察を受けることをおすすめいたします。

使用上のご注意

- 1 現在、歯の治療を受けている方や、歯および歯ぐきの病気にかかっている方、電動ハブラシを使用して歯ぐきから出血しやすい方は、歯科医にご相談のうえお使いください。
- 2 本品を浴室などの湿気の多い場所で使用しないでください。また、電池部分は水につけないでください。
- 3 本品を落としたりして、衝撃をあてないでください。
- 4 本品を直接日光にあてたり、火気のそばに近づけたりしないでください。
- 5 本品を分解したり、内部にふれたりしないでください。
- 6 電動ハブラシを歯ぐきに無理に押しつけないでください。強く当てると歯ぐきの炎症をおこす場合があります。
- 7 チップを歯や歯ぐきに無理に押しついたり、チップ部を噛んだまま手を離さないでください。チップ部がはずれることがあります。

使用上のご注意

- 8 動いているチップを無理に動きを止めないでください。故障の原因になります。
- 9 お子さまや、からだの不自由な方が使用される場合は、誤った使い方をしないように必ずまわりの方が気をつけてあげてください。
- 10 歯磨き以外の目的に使用しないでください。
- 11 長時間お使いにならないときは、乾電池を取り出して保管してください。
- 12 チップ(2種類)は使用後、水でよく洗ってください。塩素系消毒剤やお湯などにつけないでください。
- 13 本書に記載の「使用方法」、「お手入れのしかた」と異なつたご使用、保管はしないでください。
- 14 業務用に使用しないでください。
- 15 付属品の乾電池はお試しのサービス電池ですので寿命が短い場合もあります。ご了承ください。

各部の名称



商品特長

高速反転チップ

●フラットチップタイプ

高速反転により、歯面や歯の細かい溝などの汚れをくまなく除去します。

●アングルチップタイプ

高速反転により、毛先の届きにくい歯と歯の間や、歯の根元まで届き、すき間の歯垢を除去します。

※ブラッシング機能の高い、新しい形状のハブラシです。

マイナスイオンブラシ

●ブラシにマイナスイオンを発生する「松鉱石」を配合しています。

・マイナスイオンが歯垢を緩ませ、水だけで歯垢をスッパリ落とせます。

キャリングケース

●携帯に便利なソフトキャリングケースです。「ハミガキ」などを一緒にいれる事ができます。本体やブラシはよく乾かしてから入れてください。

交換用チップについて

●チップ、チップホルダーは消耗品です。毛先がひろがってきたり、摩耗してしてきたら早めに交換してください。チップセット、チップセットホルダー付は、本体をお買い上げの販売店でお求めください。

チップセットSB-120

- フラットチップ2個
- アングルチップ2個

チップセットホルダー付SB-130

- フラットチップ1個
- アングルチップ1個
- チップホルダー1個

使用方法

■ 乾電池の入れかた

- 1 本体の電池ふたを左に回してはずします。



- 2 乾電池は凸側を先にして本体に入れます。



- 3 電池ふたを右に回して使用中に水が入らないよう確実にしめてください。



- アルカリ乾電池（単3）1個で1回2分間、1日3回ご使用の場合、約1ヶ月使えます。
- チップの動きが弱くなったら、早めに乾電池を取り替えてください。



- 必ずアルカリ乾電池（単3）をご使用ください。マンガン乾電池では、本来の機能が十分に発揮できません。
- 電池ふたは完全にしめてください。しまっていないと、水が内部に入り故障の原因となります。
- 乾電池をお取り替えのときは、手をよく拭き、本体の水気をよく拭き取って、水滴が入らないようにご注意ください。
- 長期間使用しないときは乾電池を本体から取り出して保管してください。

使用方法

■ 正しい使いかた

- 1 フラットチップまたはアングルチップをチップホルダーの穴に合わせ確実に取りつけます。



- 2 チップホルダーをキャップの溝に合わせ、カチッと止まるまで（マークに合わせる）右方向に回します。



- 3 ブラッシングをする前に一度作動させ、確実に取り付けられたかをご確認ください。

- 4 「ハミガキ」をつける場合にはチップに適量つけ、チップ部を口の中に入れてから、スイッチを「on」にします。



- 「ハミガキ」をつけた状態で、口に入れる前にスイッチを「on」にすると「ハミガキ」が飛び散ることがあります。

- 5 終了時は口の中からチップ部を出さずに、スイッチを「off」にします。



- スイッチを作動したままチップ部を口から出すと「ハミガキ」が飛び散ることがあります。

使用方法

- 6 使用後はスイッチを「ON」にして、チップとホルダーをよく流水で洗い、スイッチを「OFF」にし、本体からはずした後に水気を切り、保管してください。洗浄にはお湯を使用しないでください。変形して反転動作が充分得られなくなります。



ご注意

- 長時間の使用は歯をけずる原因となります。
- チップは歯や歯ぐきに軽く当てましょう。強くあてると歯ぐきの炎症を起こす原因となります。
- 歯ぐきをはれたり出血する場合は、すぐにご使用を中止し、歯科医にご相談ください。
- チップホルダーは消耗品です。摩耗により反転動作が充分得られなくなったら交換してください。(目安は4ヶ月ですが使い方によって短くなる場合があります。)

仕様

電 源	DC1.5V(アルカリ乾電池 [単3] 1個使用)
外形寸法	本体(チップ・チップホルダー装着時) 幅24×奥行28×高さ228mm
重 さ	本体 83g
振 動 数	約2,000回/分 (DC1.2V時)
付 属 品	チップホルダー、アングルチップ、フラットチップ、キャリングケース、試用用単3乾電池……各1個

お手入れのしかた

■スイッチ部

- スイッチの動きが固くなったときは本体を下に向け、スイッチ周辺に水を流しながらスイッチの「ON」-「OFF」をくりかえしてください。その後、水気をふき取ってください。

■本体

- 汚れは水または中性洗剤溶液を浸した布をよくしぼってからふき取り、その後水気もよくふき取ってください。
- チップ(2種類) およびチップホルダーは水洗いしてから、よく水気を切ってください。



ご注意

- シンナー、ベンジンあるいはアルコール等の溶剤は使用しないでください。
- 本体は日常生活防水ですので水につけて洗わないでください。

■本体キャップ部

- キャップは右図のように、左右側面のふくらみ部を押しながら上方向に引くと、本体からはずれます。
- 本体のキャップ内部にたまった「ハミガキ」などの汚れは、キャップをはずしてキャップ部を下向きにして水洗いをしてください。その後、必ず水気をよくふき取ってください。
- 万一、チップホルダーが「ハミガキ」でかたまり、動かなくなったときは、キャップをつけたまま本体からとりはずし、しばらく水に浸したのち、セットし直して作動させてください。



ご注意

- 本体の防水ゴムを回したり、揉んだりして水洗いしないでください。また引いたり、傷つけたりしないでください。本体内部に水気が入り、故障の原因になります。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間について

弊社はこの電動ハブブラシの補修用性能部品の、製造打ち切り後最低5年間保有しております。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理のご依頼について

ご使用中に異常又は故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合はお客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。ご購入の販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

サービス窓口

本 社	〒399-8721	長野県松本市大字笹賀3039番地
		TEL (0263) 57-1284
		FAX (0263) 86-5315
東京営業所	〒104-0041	東京都中央区新富1-6-7泉ビル
		TEL (03) 3553-3811
		FAX (03) 3553-3833

きりとり線

無料修理規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、ご購入の販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるご購入の販売店に、修理のご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷(例、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載等)
 - (ホ) ご使用による汚れ、ブラシの摩耗
 - (ヘ) 本書の提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ご購入の販売店又は株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保証書

品名	電動ハブラシ
型名	DB-110
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	〒□□□-□□□□ ご住所
	お名前
	様
	お電話
販売店	住所・店名
	電話 ()

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉 精 器 製作 所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039番地

TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)